

INSTRUKCJA POBIERANIA KAŁU DO BADANIA KRWI UTAJNONEJ FIT-OC


Pobieranie próbki krok po kroku



Opisać próbkówkę:
[N] Imię i nazwisko
[A] Data urodzenia
[D] Data pobrania próbki




Przed oddaniem stolca umieścić najpierw w muszli sedesowej kilka warstw papieru toaletowego lub przeznaczonego do tego celu specjalnego papieru, aby ułatwić pobranie próbki.

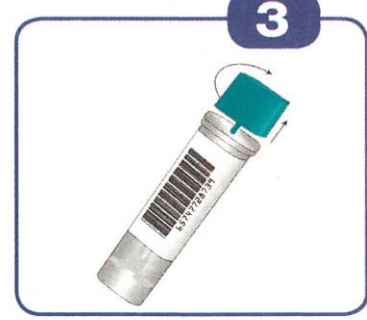


Po oddaniu stolca lekko odkręcić z próbkówki nakrętkę z pałeczką do pobierania próbki i wyciągnąć ją.



Za pomocą końcówki turkusowej pałeczki do pobierania próbki pobrać próbkę kału z kilku miejsc.

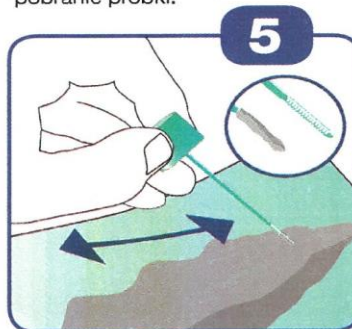


Rowki na końcówce muszą być całkowicie wypełnione kałem.
Na patyczku powinna znajdować się mała ilość kału

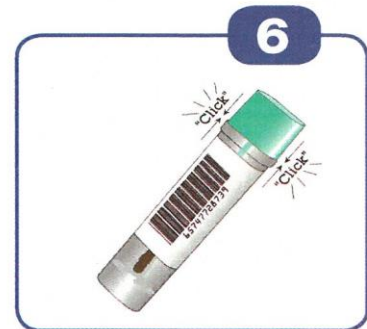

Włożyć pałeczkę do pobierania próbki do próbkówki i zamknąć próbkówkę. Słyszalne zatrzaśnięcie typu „klik” oznacza prawidłowe zamknięcie próbkówki. Nie pobierać próbki ponownie!



Mocno potrząsnąć próbkówką. Włożyć ją do strunowej torebki, a następnie zamknąć torebkę.

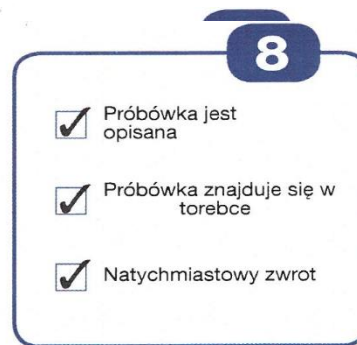

Proszę sprawdzić!

Dystrybutor / distributed by:

Mast Diagnostica GmbH

Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0
Faks +49 (0)4533 2007 68

fit@mast-diagnostics.de
www.fit-screening.de



Producent:



EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japonia

2. Jak pobrać próbkę kału



Folia spożywcza na desce klozetowej (pamiętaj, aby zostawić dołek)



Pojemnik, w jakim sprzedawane są winogrona



Złożony papier toaletowy na dłoni



Torba plastikowa lub rękawiczka na dłoni



Pusty, czysty pojemnik margarynie lub lodach



Pusty, czysty pojemnik na żywność na wynos

Ważne jest, aby próbka kału nie dotknęła wody w toalecie !

Istnieją różne sposoby wypróżnienia umożliwiające pobranie próbki kału, np.:

1. Przytrzymaj w ręce złożony na kilka części kawałek papieru toaletowego.
2. Załóż na rękę mały, jednorazowy woreczek plastikowy albo rękawiczkę.
3. Wypróżnij się do czystego, jednorazowego pojemnika wyłożonego papierem toaletowym, aby można było łatwo wrzucić kał do toalety po pobraniu próbki.

Nie zapomnij umyć rąk!

Pobraną próbkę krwi dostarczyć do punktu pobrań lub bezpośrednio do laboratorium.